

СОВРЕМЕННЫЕ
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ
СРЕДСТВА





RDEZ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
КОМПАНИЯ «РДЕЗ»

О КОМПАНИИ

История компании «РДЕЗ» – это несколько лет успешной работы в сфере дезинфекции. Наша компания является высокотехнологичным разработчиком и производителем современных дезинфицирующих средств.

Наши квалифицированные специалисты интенсивно работают над созданием новых дезинфицирующих и моющих препаратов, чтобы удовлетворять потребности различных отраслей народного хозяйства:

- медицина и ветеринария (ЛПУ, санатории, профилактории и т. п.);
- образование, культура и спорт (детские сады, школы, институты, музеи, театры, бассейны, стадионы и т. п.);
- общественное питание (кафе, бары, рестораны, столовые и т. п.);
- пищевая промышленность (безалкогольная, пивная, винно-водочная, кондитерская, рыбная, мясная, птицеперерабатывающая, молочная, детское питание, полуфабрикаты);
- сфера услуг (салоны красоты, парикмахерские, маникюрные салоны, SPA-салоны, солярии и т. д.);
- домохозяйства (бытовая химия).

Отличный результат и высокий профессионализм – это принципы нашей работы.

Компания имеет собственную производственную базу и специализированные склады. Также особое внимание мы уделяем развитию широкой дилерской сети на территории России.

СОТРУДНИЧЕСТВО С НАМИ – ЭТО:

- удобство – ООО «РДЕЗ» выполняет функции персонального проводника в мир дезинфекции: специалисты нашей компании квалифицированно и своевременно окажут методическую и организационную помощь в осуществлении планирования и реализации всевозможных мероприятий по дезинфекции в организациях различного профиля;
- простота – специалисты нашей компании могут выполнить работы по подбору дезинфицирующих средств по заданным техническим параметрам;
- выгода – продукция компании «РДЕЗ» обладает высокими показателями дезинфицирующих свойств, экономичностью и низкими токсикологическими показателями при использовании.

Мы искренне благодарим наших многочисленных партнеров, которые являются не только потребителями нашей продукции, но также неоценимыми помощниками при разработке и совершенствовании наших препаратов. Мы всегда будем рады новым партнерам, желающим плодотворного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества.

Доверьте свою защиту профессиональной компании, которая держит руку на пульсе дезинфекции и умеет результативно использовать свои знания на практике.

Вместе мы делаем мир чище!

СОДЕРЖАНИЕ

О компании	1
Антисептическая и гигиеническая обработка	3
Обработка поверхностей.....	11
Комплексная обработка	14
Стерилизация и дезинфекция высокого уровня изделий медицинского назначения и эндоскопов	22
Узконаправленные дезинфицирующие средства	27
Хлорсодержащие препараты.....	30
Дополнительное оборудование и материалы	32
Схемы. Обработка рук. Узконаправленные дезинфицирующие средства	34
Схема. Обработка эндоскопов и инструментов к ним	35
Схемы. Обработка изделий медицинского назначения.....	36
Таблицы	37
Для заметок	39



АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ И ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА



АМАДЕУС

Готовое к применению универсальное дезинфицирующее средство – кожный антисептик

СОСТАВ:

- спирт изопропиловый;
- ЧАС;
- вспомогательные компоненты, отдушка.

МИКРОБИОЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ:

- грамотрицательных и грамположительных бактерий (в том числе возбудителей туберкулеза и внутрибольничных инфекций);
- вирусов (острые респираторные вирусные инфекции; герпес; полиомиелит; гепатиты всех видов, включая гепатиты А, В и С; ВИЧ; аденовирус и пр.);
- патогенных грибов (включая кандиды и трихофитон).

НАЗНАЧЕНИЕ

- Обработка рук хирургов и персонала, участвующего в операциях и других инвазивных процедурах и манипуляциях.
- Обеззараживание и обезвреживание локтевых сгибов доноров, а также кожи операционного поля перед выполнением хирургических и инвазивных процедур, манипуляций, инъекций, пункций.
- Гигиеническая обработка рук и кожных покровов.
- Обработка ступней ног с целью профилактики грибковых заболеваний.
- Быстрая очистка и дезинфекция различных твердых поверхностей или предметов, в том числе загрязненных кровью (труднодоступных поверхностей, жесткой и мягкой мебели; осветительной аппаратуры, офисной техники, жалюзи, радиаторов отопления; поверхностей медицинских приборов и оборудования, датчиков диагностического оборудования и т. п.).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокоэффективное и безопасное антисептическое средство.
- Не обладает кожно-резорбтивным и сенсibiliзирующим действием.
- Дезинфекция и очистка поверхностей. Время экспозиции от 30 секунд.

ФОРМА ВЫПУСКА: флакон 1 л, флакон 1 л под евродозатор, спрей 100 мл.

«Перед любой манипуляцией с катетером и перед каждым доступом в систему персонал обрабатывает руки кожным антисептиком».
(СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 5.11 и 5.18)

АМАДЕУС-ОП

**Готовый к применению маркирующий
кожный антисептик**

СОСТАВ:

- спирт изопропиловый;
- ЧАС;
- вспомогательные компоненты, отдушка, краситель (оранжевый).

МИКРОБИОЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ:

- грамотрицательных и грамположительных бактерий (в том числе возбудителей туберкулеза и внутрибольничных инфекций);
- вирусов (острые респираторные вирусные инфекции; герпес; полиомиелит; гепатиты всех видов, включая гепатиты А, В и С; ВИЧ; аденовирус и пр.);
- патогенных грибов (включая кандиды и трихофитон).

НАЗНАЧЕНИЕ

- Обеззараживание и обезжиривание кожи операционного поля.
- Обработка локтевых сгибов доноров.
- Обработка кожи перед введением катетеров и пункции суставов с обозначением границ обработки (п. 3.27 СанПиН 2.1.3.2630-10 от 18 мая 2010 г. № 58).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не обладает кожно-резорбтивным и сенсibilизирующим действием.
- Безопасно и эффективно.
- Время экспозиции от 20 секунд.

ФОРМА ВЫПУСКА: спрей 100 мл, флакон 1 л.

«Обработку операционного поля пациента перед хирургическим вмешательством и другими манипуляциями, связанными с нарушениями целостности кожных покровов (пункции, биопсии), предпочтительно проводить антисептиком, содержащим краситель».
(СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 12.9.3)



АРМАСЕПТИК

Готовый к применению кожный антисептик

СОСТАВ:

- полигексаметиленбигуанидин гидрохлорид (ПГМБ);
- гель алое.

МИКРОБИОЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ

В ОТНОШЕНИИ:

- грамотрицательных и грамположительных бактерий (в том числе возбудителей туберкулеза и внутрибольничных инфекций);
- вирусов (острые респираторные вирусные инфекции; герпес; полиомиелит; гепатиты всех видов, включая гепатиты А, В и С; ВИЧ; аденовирус; энтеровирусы; ротавирусы; вирусы атипичной пневмонии, птичьего гриппа, свиного гриппа и др.);
- патогенных грибов (включая дерматофиты, кандиды).

НАЗНАЧЕНИЕ

- Обработка рук хирургов и персонала, участвующего в операциях и других инвазивных процедурах и манипуляциях.
- Обеззараживание и обезвреживание локтевых сгибов доноров, а также кожи операционного поля перед выполнением хирургических и инвазивных процедур, манипуляций, инъекций, пункций.
- Гигиеническая обработка рук и кожных покровов.
- Обработка ступней ног с целью профилактики грибковых заболеваний.
- Частичная санитарная обработка кожных покровов (в том числе для профилактики пролежней).
- Обеззараживание резиновых перчаток (из латекса), надетых на руки персонала.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не обладает кожно-резорбтивным и сенсibiliзирующим действием, безопасно. Предназначено для частого использования за счет наличия в составе натурального смягчающего компонента – геля алое. Рекомендовано для использования в роддомах, отделениях неонатологии и педиатрии. Пролонгированный антимикробный эффект более 3 часов. Время экспозиции от 30 секунд.

ФОРМА ВЫПУСКА: спрей 100 мл, флакон с пенообразователем 200 мл, флакон 1 л, флакон 1 л под евродозатор.

«Для санитарной обработки кожных покровов пациентов (общей или частичной) используют антисептики, не содержащие спирты, обладающие дезинфицирующими и моющими свойствами... При выборе кожных антисептиков, моющих средств и средств ухода за кожей следует учитывать индивидуальную непереносимость». (СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 12.3 и 12.9.6)



РДЕЗ САЛФЕТКИ ИНЪЕКЦИОННЫЕ

Универсальные салфетки для антисептической обработки инъекционного поля, кожных покровов и дезинфекции поверхностей

СОСТАВ:

- этиловый спирт (70 %).

МИКРОБИЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ:

- грамотрицательных и грамположительных бактерий (в том числе возбудителей туберкулеза и внутрибольничных инфекций);
- вирусов (острые респираторные вирусные инфекции; герпес; полиомиелит; гепатиты всех видов, включая гепатиты А, В и С; ВИЧ; аденовирус; энтеровирусы; ротавирусы; вирусы атипичной пневмонии, птичьего гриппа, свиного гриппа и др.);
- патогенных грибов (включая дерматофиты, кандиды).

НАЗНАЧЕНИЕ

- Обработка кожи до и после инъекций.
- Обработка рук, инструментов, приборов.
- Первичное снятие загрязнений с кожи вокруг раны.
- Обработка поверхностей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективная и быстрая дезинфекция.
- Благодаря индивидуальной упаковке салфетки могут быть наиболее востребованы в каретах скорой помощи, бригад медицины катастроф, медпунктах и т. д.

ФОРМА ВЫПУСКА: саше 62x102 мм.



«Обработка инъекционного поля предусматривает обеззараживание кожи с помощью спиртосодержащего антисептика в месте инъекций (подкожных, внутримышечных, внутривенных) и взятия крови». (СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 12.9.4)

РОФАЛЬ МЫЛО АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ

Антибактериальное моющее средство

СОСТАВ:

- антибактериальный компонент;
- амиды жирных кислот кокосового масла;
- протеины пшеницы;
- экстракты тысячелистника, календулы и крапивы.

МИКРОБИЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ

В ОТНОШЕНИИ:

- грамотрицательных и грамположительных бактерий.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Гигиеническая обработка рук медицинского персонала.
- Гигиеническая обработка рук и санитарная обработка кожных покровов пациентов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональное средство для частого мытья рук.
- Разработано специально для защиты кожи рук медицинских работников от неблагоприятных факторов.
- Не обладает кожно-резорбтивным и сенсibiliзирующим действием, безопасно.
- Рекомендовано для чувствительной кожи, сочетает высокую антимикробную активность и бережный уход.

ФОРМА ВЫПУСКА: канистра 5 л, флакон 1 л под евродозатор, флакон 1 л, флакон 500 мл.

«Медицинский персонал должен быть обеспечен в достаточном количестве эффективными средствами для мытья и обеззараживания рук... Основными методами обеззараживания рук являются: гигиеническая обработка рук медицинского персонала и обработка рук хирургов».
(СанПиН 2.1.3.2630-10, «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»)



РОФАЛЬ МЫЛО ЖИДКОЕ

Моющее средство

СОСТАВ:

- очищающий компонент;
- амиды жирных кислот кокосового масла;
- протеины пшеницы;
- экстракты шалфея, чистотела и череды.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Гигиеническая обработка рук медицинского персонала.
- Гигиеническая обработка рук и санитарная обработка кожных покровов пациентов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Средство безопасно при частом мытье рук.
- Разработано для защиты кожи медицинских работников от неблагоприятных факторов.
- Не обладает кожно-резорбтивным и сенсibiliзирующим действием, безопасно.
- Рекомендовано для чувствительной кожи, сочетает высокое очищающее действие и бережный уход.

ФОРМА ВЫПУСКА: флакон 1 л под евродозатор, флакон 1 л, флакон 500 мл.

«Гигиеническая обработка рук проводится двумя способами:
– гигиеническое мытье рук мылом и водой для удаления загрязнений и снижения количества микроорганизмов;
– обработка рук кожным антисептиком для снижения количества микроорганизмов до безопасного уровня».
(СанПин 2.1.3.2630-10, п. 12.4.2)





РОФАЛЬ КРЕМ

Защитный крем для рук

СОСТАВ:

- вода;
- глицерин;
- глицерил стеарат;
- диметикон;
- масло каритэ, масло подсолнечника;
- витамин F.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Увлажнение и защита кожи рук от деструктивного воздействия химических соединений и факторов внешней среды.
- Профессиональный уход за кожей рук медицинского персонала для снижения риска возникновения контактных дерматитов (п. 12.3 СанПиН 2.1.3.2630-10 от 18 мая 2010 г. № 58).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Создан специально для защиты кожи рук медицинских работников.
- Увлажнение и смягчение кожных покровов.
- Быстро впитывается, не оставляя жирных следов.
- Гипоаллергенен, не содержит красителей.
- Рекомендован для регулярного ухода за кожей рук после обработки антисептическими средствами (в том числе для применения в роддомах, детских отделениях и отделениях неонатологии).

ФОРМА ВЫПУСКА: флакон 500 мл, туба 100 мл.

«Медицинский персонал должен быть обеспечен в достаточном количестве эффективными средствами для мытья и обеззараживания рук, а также средствами для ухода за кожей рук (кремы, лосьоны, бальзамы и др.) для снижения риска возникновения контактных дерматитов».
(СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 12.3)

Приказ Минздравсоцразвития РФ
«Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и Стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами» от 17.12.2010 N 1122н, п. 10, ч. III
«Регенерирующие, восстанавливающие средства»



ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

РДЕЗ САЛФЕТКИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ

Универсальные салфетки для антисептической обработки кожных покровов и дезинфекции поверхностей

СОСТАВ:

- полигексаметиленбигуанидин гидрохлорид (ПГМБ);
- гель алое.

МИКРОБИЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ:

- грамотрицательных и грамположительных бактерий (в том числе возбудителей туберкулеза и внутрибольничных инфекций);
- вирусов (острые респираторные вирусные инфекции; герпес, полиомиелит; гепатиты всех видов, включая гепатиты А, В и С; ВИЧ; аденовирус; энтеровирусы; ротавирусы; вирусы атипичной пневмонии, птичьего гриппа, свиного гриппа и др.);
- патогенных грибов (включая дерматофиты, кандиды).

НАЗНАЧЕНИЕ

- Гигиеническая обработка рук.
- Обработка ступней ног с целью профилактики грибковых заболеваний.
- Очистка и дезинфекция различных твердых непористых поверхностей и предметов, в том числе загрязненных кровью (жесткой мебели, осветительной аппаратуры, столов, офисной техники и т. п.; медицинских приборов и оборудования, стоматологических наконечников и зеркал, оптических приборов и оборудования, датчиков диагностического оборудования (в том числе УЗИ); наружных поверхностей шлангов гибких эндоскопов и колоноскопов (при условии, что не будет наблюдаться фиксации органических загрязнений); наконечников для клизм, термометров, фонендоскопов и т. п.; предметов ухода за больными; медицинских перчаток из различных материалов, надетых на руки персонала и т. д.).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не обладает кожно-резорбтивным и сенсibilизирующим действием, безопасно.
- Предназначено для частого использования за счет наличия в составе натурального смягчающего компонента – геля алое.
- Рекомендовано для использования в роддомах, отделениях неонатологии и педиатрии (в том числе для обработки кожи детей с рождения).

ФОРМА ВЫПУСКА: банка 60 салфеток (135x185 мм).

«При необходимости экстренной обработки небольших по площади или труднодоступных поверхностей возможно применение готовых форм ДС ... или готовыми к применению дезинфицирующими салфетками». (СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 6.8)



ВИРБАКСАН-СПРЕЙ

Готовое к применению дезинфицирующее средство в виде спрея

СОСТАВ:

- полигексаметиленбигуанид гидрохлорид (ПГМГ);
- 2-пропанол.

МИКРОБИЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ:

- грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей туберкулеза, внутрибольничных инфекций, кишечных инфекций);
- вирусов (острые респираторные вирусные инфекции; герпес; полиомиелит; гепатиты всех видов, включая гепатиты А, В и С; ВИЧ; аденовирус и пр.);
- грибов рода кандиды, трихофитон.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Очистка и дезинфекция различных поверхностей или предметов, в том числе загрязненных кровью.
- Обработка ступней ног с целью профилактики грибковых заболеваний.
- Очистка и дезинфекция различных твердых непористых поверхностей и предметов, в том числе загрязненных кровью (жесткой мебели, осветительной аппаратуры, столов, офисной техники и т. п.; медицинских приборов и оборудования, стоматологических наконечников и зеркал, оптических приборов и оборудования, датчиков диагностического оборудования; наконечников для клизм, термометров, фонендоскопов и т. п.; резиновых, пластиковых, пропиленовых ковриков; предметов ухода за больными; медицинских перчаток из различных материалов при проведении манипуляционных действий и т. д.).
- Дезинфекция и дезодорация воздуха помещений (в том числе борьба с плесенью).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Активно разрушает на поверхностях биологические пленки.
- Обладает хорошими моющими свойствами.
- Не обладает местнораздражающим и резорбтивным действием на кожу, не обладает сенсibilизирующим действием, безопасно.
- Средство быстро высыхает, не оставляя следов на поверхностях.
- Смывание остатков средства с поверхностей в помещении не требуется.
- Обработку поверхностей и объектов можно проводить в присутствии пациентов.
- Средство безопасно при обработке объектов в детских учреждениях, в том числе отделениях неонатологии.

ФОРМА ВЫПУСКА: флакон-спрей 500 мл.

«При необходимости экстренной обработки небольших по площади или труднодоступных поверхностей возможно применение готовых форм ДС, например, на основе спиртов, с коротким временем обеззараживания (способом орошения с помощью ручных распылителей».
(СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 6.8)





КОМПЛЕКСНАЯ
ОБРАБОТКА

ДЕЗРЕКС

Универсальное концентрированное дезинфицирующее средство с моющим эффектом

СОСТАВ:

- N,N-бис (3-аминопропил) додециламин;
- ПАВ, функциональные компоненты.

МИКРОБИОЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ:

- бактерий (включая возбудителей туберкулеза);
- вирусов (Коксаки, ЕСНО, полиомиелита; энтеральных и парентеральных гепатитов; ВИЧ; гриппа, в том числе H5N1, H1N1; аденовирусов и других возбудителей ОРВИ, герпеса, цитомегалии);
- грибов (возбудителей кандидозов и дерматофитий, плесневых грибов).

НАЗНАЧЕНИЕ

- Дезинфекция различных поверхностей или предметов (в том числе детской мебели, поверхностей аппаратов, приборов, санитарно-технического оборудования, предметов ухода за больными, обуви, ковров, уборочного инвентаря, мусороуборочного оборудования, транспорта).
- Дезинфекция медицинских отходов группы Б, В, проведение генеральных уборок. Дезинфекция стоматологических оттисков и зубопротезных заготовок.
- Дезинфекция, совмещенная с предстерилизационной очисткой изделий медицинского назначения (ручным и механическим способами).
- Предстерилизационная очистка изделий медицинского назначения.
- Окончательная очистка эндоскопов перед ДВУ.
- Профилактическая дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования воздуха (в том числе борьба с плесенью)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокоэффективное, безопасное и экономичное дезинфицирующее средство.
- Средство не требует ротации, т. к. препятствует развитию резистентной микрофлоры.
- Возможность варьирования временем экспозиции в различных режимах.
- Дезинфекция куветов и приспособлений к ним; комплектующих деталей наркозно-дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудования.
- Может использоваться на предприятиях коммунально-бытового обслуживания, а также фармацевтической и биотехнологической промышленности.
- Не обладает сенсibiliзирующим действием.
- Обеззараживание биологических жидкостей и выделений больного (кровь, ликвор, мокрота, фекально-мочевая взвесь, моча).



Срок годности рабочих растворов – 20 суток.
ФОРМА ВЫПУСКА: канистра-дозатор 1 л.

Основные режимы дезинфекции поверхностей:

Вид инфекции	Концентрация, %	Экспозиция, мин
Бактериальные	0,3	60
Вирусные	2,0	
Туберкулез	5,0	
Кандидозы	1,0	
Дерматофитии	5,0	

Основные режимы дезинфекции и ПСО, совмещенные в одном процессе:

	Концентрация, %	Экспозиция, мин
ИМН	2,0	60
Эндоскопы и инструменты к ним	2,0	15

«Изделия медицинского назначения многократного применения, которые в процессе эксплуатации могут вызвать повреждение кожи, слизистой оболочки, соприкасаться с раневой поверхностью, контактировать с кровью или инъекционными препаратами, подлежат дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации».
(СанПиН 2.1.3.1375-03)

ВИРБАКСАН

Универсальное концентрированное дезинфицирующее средство с моющим эффектом

СОСТАВ:

- N,N-бис (3-аминопропил) додециламин;
- ЧАС;
- ПГМГ и функциональные компоненты.

МИКРОБИОЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ:

- грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая микобактерии туберкулеза и возбудителей внутрибольничных инфекций);
- вирусов (в отношении всех известных вирус-патогенов человека, включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и других возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных и парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, птичьего гриппа, ВИЧ и др.);
- грибов рода кандиды и трихофитон, плесневых грибов;
- обладает овоцидными свойствами в отношении возбудителей паразитарных болезней (цист и ооцист простейших, яиц и личинок гельминтов).

НАЗНАЧЕНИЕ

- Дезинфекция, мытье и дезодорирование всех видов поверхностей предметов интерьера, аппаратуры и оборудования, транспорта.
- Дезинфекция кузевов и приспособлений к ним, комплектующих деталей наркозно-дыхательной, ингаляционной аппаратуры, анестезиологического оборудования, стоматологических отсосов, зубопротезных заготовок и протезов.
- Дезинфекция медицинских отходов, выделений больного, крови в сгустках, медицинских пиявок.
- Для дезинфекции (различных хирургических и стоматологических ротационных, эндодонтических инструментов, а также стоматологических материалов), совмещенной с предстерилизационной очисткой (ПСО) ручным и механизированным способами (в том числе в ультразвуковых установках любого типа).



- Деинвазия объектов и дезинфекция воздуха, систем кондиционирования, вентиляции.
- Обработка поверхностей, пораженных плесневыми грибами.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Безопасность, экономичность, биоразлагаемость и экологичность.
- Наличие в составе нескольких действующих веществ позволяет минимизировать риск возникновения резистентности у бактерий.
- Высокая эффективность в отношении штаммов MB5 и M.Terra.
- Возможность варьирования временем экспозиции в различных режимах.

Срок годности рабочих растворов – 34 дня.

ФОРМА ВЫПУСКА: канистра-дозатор 1 л.

Основные режимы дезинфекции и ПСО, совмещенные в одном процессе:

	Концентрация, %	Экспозиция, мин
ИМН (инструменты к эндоскопам, хирургические, стоматологические)	0,08	60
	0,25	30
	1,0	15

Основные режимы дезинфекции поверхностей:

Вид инфекции	Концентрация, %	Экспозиция, мин
Бактериальные	0,01	60
Вирусные	0,1	
Туберкулез	0,25	
Дерматофитии	0,5	

ДЕНИДЕЗ

Универсальное концентрированное дезинфицирующее средство с моющим эффектом

СОСТАВ:

- N,N-бис (3-аминопропил) додециламин;
- ПАВ и вспомогательные компоненты.

МИКРОБИОЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ:

- грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая микобактерии туберкулеза);
- вирусов (Коксаки, ЕСНО, полиомиелита; энтеральных и парентеральных гепатитов; ВИЧ; гриппа, в том числе H5N1, H1N1; аденовирусов и других возбудителей ОРВИ, герпеса, цитомегалии и других);
- грибов рода кандиды, дерматофитов, плесневых грибов.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Дезинфекция, мытье и дезодорирование всех видов поверхностей предметов интерьера, аппаратуры и оборудования, кузевов и приспособлений к ним.
- Дезинфекция комплектующих деталей наркозно-дыхательной, ингаляционной аппаратуры, анестезиологического оборудования, стоматологических оттисков, зубопротезных заготовок и протезов.
- Для дезинфекции (различных хирургических и стоматологических ротационных, эндодонтических инструментов, а также стоматологических материалов), совмещенной с предстерилизационной очисткой (ПСО) ручным и механизированным способами (в том числе в ультразвуковых установках любого типа).
- Дезинфекция воздуха, систем кондиционирования, вентиляции, поверхностей в помещениях.
- Обработка поверхностей, пораженных плесневыми грибами.
- Проведение генеральных уборок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не обладает сенсibiliзирующим действием, безопасно и экономично.
- Активно разрушает биологические пленки на поверхностях из любых материалов.
- Рекомендовано для использования в роддомах, отделениях неонатологии и педиатрии.
- Не требует ротации.
- Высокая эффективность в отношении штаммов MB5 и M. Terra.

Срок годности рабочих растворов – 30 дней.

ФОРМА ВЫПУСКА: канистра-дозатор 1 л.



Основные режимы дезинфекции поверхностей:

Вид инфекции	Концентрация, %	Экспозиция, мин
Бактериальные	0,25	60
Вирусные	2,0	
Туберкулез	3,0	
Дерматомитии и кандидозы	2,0	

Основные режимы дезинфекции и ПСО, совмещенные в одном процессе:

	Концентрация, %	Экспозиция, мин
ИМН	2,0	60
	4,0	15
Эндоскопы	3,5	15

Основные режимы дезинфекции и ПСО, совмещенные в одном процессе:

	Концентрация, %	Экспозиция, мин
ИМН	2,0	60
	4,0	15
Эндоскопы	3,5	15

РОСДЕЗ

Универсальное концентрированное дезинфицирующее средство с моющим эффектом

СОСТАВ:

- N,N-бис (3-аминопропил) додециламин;
- ЧАС и вспомогательные компоненты.

МИКРОБИОЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ:

- грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая микобактерии туберкулеза).
- вирусов (в отношении всех известных вирус-патогенов человека, в том числе вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов (в том числе гепатита А, В и С), герпеса, включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и других возбудителей острых респираторных инфекций, вирус полиомиелита, атипичной пневмонии, птичьего гриппа, свиного гриппа, ВИЧ и др.);
- грибов рода кандиды, дерматофитов, плесневых грибов;
- обладает овоцидными свойствами в отношении возбудителей паразитарных болезней (цист и ооцист простейших, яиц и личинок гельминтов, остриц).

НАЗНАЧЕНИЕ:

- Дезинфекция, мытье и дезодорирование всех видов поверхностей предметов интерьера, аппаратуры и оборудования, кузевов и приспособлений к ним.
- Дезинфекция комплектующих деталей наркозно-дыхательной, ингаляционной аппаратуры, анестезиологического оборудования, стоматологических оттоков, зубопротезных заготовок и протезов.
- Дезинфекция медицинских отходов, включая выделения больного и кровь в сгустках.
- Для дезинфекции (различных хирургических и стоматологических ротационных, эндодонтических инструментов, а также стоматологических материалов), совмещенной с предстерилизационной очисткой (ПСО) ручным и механизированным способами (в том числе в ультразвуковых установках любого типа).
- Предварительная очистка эндоскопов, окончательная очистка эндоскопов перед ДВУ.
- Дезинфекция воздуха, систем кондиционирования, вентиляции, поверхностей в помещениях.
- Борьба с плесенью.
- Проведение генеральных уборок и деинвазия объектов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Средство имеет хорошие моющие и дезодорирующие свойства, не портит обрабатываемые объекты, не обесцвечивает ткани, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов.



- Экономичное и биоразлагаемое.
- Не обладает кожно-резорбтивной и сенсibiliзирующей активностью.
- Возможность варьирования временем экспозиции в различных режимах.
- Тестировано на тест-штамме MB5.
- Минимизация риска возникновения резистентности у бактерий.

Срок годности рабочих растворов – 34 дня.

ФОРМА ВЫПУСКА: канистра-дозатор 1 л.

Основные режимы дезинфекции и ПСО, совмещенные в одном процессе:

	Концентрация, %	Экспозиция, мин
ИМН	0,08	60
	1,0	15
Эндоскопы	0,25	45
	1,0	10

Основные режимы дезинфекции поверхностей:

Вид инфекции	Концентрация, %	Экспозиция, мин
Бактериальные	0,01	60
Вирусные	0,1	
Туберкулез	0,25	
Грибковые	0,5	

ИНЖЕНИУМ

Универсальное концентрированное дезинфицирующее средство с моющим эффектом

СОСТАВ:

- N,N-бис (3-аминопропил) додециламин;
- ПГМГ и функциональные компоненты.

МИКРОБИОЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ:

- грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая микобактерии туберкулеза);
- вирусов (в отношении всех известных вирус-патогенов человека, в том числе вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов (в том числе гепатита А, В и С), герпеса, включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и других возбудителей острых респираторных инфекций, вирус полиомиелита, атипичной пневмонии, птичьего гриппа, свиного гриппа, ВИЧ и др.);
- грибов рода кандиды, трихофитон, плесневых грибов;
- обладает спороцидным действием.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Дезинфекция различных поверхностей или предметов (в том числе детской мебели, поверхностей аппаратов, приборов, санитарно-технического оборудования, предметов ухода за больными, обуви, ковров, транспорта).
- Дезинфекция кувезов и приспособлений к ним; комплектующих деталей наркозно-дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудования.
- Дезинфекция стоматологических оттисков из альгинатных, силиконовых материалов, полиэфирной смолы.
- Дезинфекция, совмещенная с предстерилизационной очисткой изделий медицинского назначения (ручным и механическими способами). Предварительная, окончательная очистка и ДВУ эндоскопов.
- Профилактическая дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования воздуха (в том числе борьба с плесенью).
- Дезинфекции, чистки, мойки и дезодорирование мусороуборочного оборудования и биотуалетов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокоэффективное и экономичное дезинфицирующее средство.
- Очень низкая токсикологическая нагрузка в связи с малым содержанием действующих веществ, исключая возникновение аллергических реакций.
- Не обладает сенсibiliзирующим и кожно-резорбтивным действием.
- Средство не требует ротации, т. к. препятствует развитию резистентной микрофлоры.
- Имеет хорошие моющие и дезодорирующие свойства, не портит обрабатываемые объекты, не обесцвечивает ткани, не фиксирует



Основные режимы дезинфекции поверхностей:

Вид инфекции	Концентрация, %	Экспозиция, мин
Бактериальные	0,01	60
Вирусные	0,1	
Туберкулез	0,25	
Кандидозы	0,05	
Дерматофитии	0,25	

Режимы применения:

	Концентрация, %	Экспозиция, мин
Дезинфекция ИМН, совмещенная с ПСО	0,01	60
ДВУ эндоскопов	2,0	60

органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов и изделий, изготовленных из коррозионностойких инструментальных сталей, сплавов цветных металлов, титановых и алюминиевых сплавов и полимерных материалов.

- Обеззараживание биологических жидкостей и выделений больного (кровь, ликвор, мокрота, фекально-мочевая взвесь, моча, рвотные массы).
- Рекомендовано для дезинфекции и мытья помещений и оборудования на предприятиях общественного питания, торговли, коммунальных объектах, местах массового скопления людей.

Срок годности рабочих растворов – 33 дня.

ФОРМА ВЫПУСКА: канистра-дозатор 1 л.

РОСДЕЗ-ЭНЗИМ

Универсальное концентрированное дезинфицирующее средство с моющим эффектом

СОСТАВ:

- ЧАС;
- ПГМГ;
- ферменты (липаза, амилаза, протеаза).

МИКРОБИОЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ:

- грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая микобактерии туберкулеза);
- вирусов (в отношении всех известных вирус-патогенов человека, в том числе вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов (в том числе гепатита А, В и С), герпеса, включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и других возбудителей острых респираторных инфекций, вирус полиомиелита, атипичной пневмонии, птичьего гриппа, свиного гриппа, ВИЧ);
- грибов рода кандида, дерматофитов, плесневых грибов;
- обладает овоцидными свойствами в отношении возбудителей паразитарных болезней (цист и ооцист простейших, яиц и личинок гельминтов, остриц).

НАЗНАЧЕНИЕ

- Дезинфекция, мытье и дезодорирование всех видов поверхностей предметов интерьера, аппаратуры и оборудования, посуды, предметов ухода за больными, кушеток и приспособлений к ним.
- Дезинфекция комплектующих деталей наркозно-дыхательной, ингаляционной аппаратуры, анестезиологического оборудования, стоматологических оттисков, зубопротезных заготовок и протезов.
- Дезинфекция медицинских отходов, включая выделения больного и кровь в сгустках, донорскую кровь и препараты крови с истекшим сроком годности, медицинские пиявки после проведения гирудотерапии.
- Для дезинфекции (различных хирургических и стоматологических ротационных, эндодонтических инструментов, а также стоматологических материалов), совмещенной с предстерилизационной очисткой (ПСО) ручным и механизированным способами (в том числе в ультразвуковых установках любого типа).
- Предварительная, окончательная очистка и ДВУ эндоскопов.
- Дезинфекция воздуха, систем кондиционирования и вентиляции.
- Борьба с плесенью.
- Дезинфекция мусороуборочного оборудования, биотуалетов и деинвазия объектов.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Синергетическое сочетание активнодействующих веществ.
- Глубокое очищение благодаря наличию энзимов.
- Безопасность при обработке изделий медицинского назначения: средство имеет хорошие моющие и дезодорирующие свойства, не портит обрабатываемые объекты, не обесцвечивает ткани, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов.
- Оптимальные концентрации рабочих растворов.

Срок годности рабочих растворов – 34 дня (рабочие растворы используются многократно).

ФОРМА ВЫПУСКА: канистра-дозатор 1 л.

Основные режимы дезинфекции поверхностей:

Вид инфекции	Концентрация, %	Экспозиция, мин
Бактериальные	0,01	60
Вирусные	0,08	
Туберкулез	0,08	
Грибковые	0,2	

Режимы применения:

	Концентрация, %	Экспозиция, мин
Дезинфекция ИМН, совмещенная с ПСО	0,08	60
ДВУ эндоскопов	1,8	60

РОСДЕЗ-ОКСИ

Универсальное концентрированное кислородосодержащее дезинфицирующее средство

СОСТАВ:

- ЧАС;
- перекись водорода;
- функциональные добавки.

МИКРОБИЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ

- В отношении бактерий (в том числе микобактерий туберкулеза, возбудителей анаэробных и внутрибольничных инфекций, метициллин-резистентного золотистого стафилококка (MRSA), ванкомицин-резистентного энтерококка (VRE), синегнойной палочки).
- Обладает спороцидной, вирулицидной активностью в отношении всех известных вирусов-патогенов человека, в том числе вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов (в том числе гепатита А, В и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, энтеровирусов, ротавирусов, вирусов атипичной пневмонии (SARS), птичьего гриппа (H5N1), свиного гриппа (A/H1N1), гриппа человека, герпеса и др.
- Обладает спороцидной и фунгицидной активностью (кандида, трихофитон, плесень).

НАЗНАЧЕНИЕ

- Дезинфекция и мытье различных поверхностей или предметов (в том числе детской мебели, поверхностей аппаратов, приборов, санитарно-технического оборудования, предметов ухода за больными, обуви, ковриков, транспорта).
- Дезинфекция, совмещенная с предстерилизационной очисткой изделий медицинского назначения (ручным и механическим способами).
- Предварительная, окончательная очистка и ДВУ эндоскопов.
- Стерилизация изделий медицинского назначения.
- Дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования воздуха (в том числе борьба с плесенью).
- Дезинфекция, чистка, мойка и дезодорирование медицинских отходов (классов Б и В), мусороуборочного оборудования и биотуалетов и проведение генеральных уборок.

Основные режимы дезинфекции поверхностей:

Вид инфекции	Концентрация, %	Экспозиция, мин
Бактериальные	0,3	60
Вирусные	0,8	
Туберкулез	1,5	
Дерматофитии	1,5	



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Средство неограниченно смешивается с водой.
- Не требует ротации.
- Обладает синергетическим тройным действием: дезинфицирующим, моющим и дезодорирующим; полностью нейтрализует неприятные запахи.
- Не оказывает сенсibiliзирующее и кожно-резорбтивное действие.
- Эффективно разрушает биопленки и препятствует их образованию, имеет хорошие моющие свойства, не фиксирует органические загрязнения на обрабатываемых поверхностях и инструментах.
- Обладает пролонгированным остаточным эффектом не менее 5 часов.

Срок годности рабочих растворов – 33 дня.

ФОРМА ВЫПУСКА: флакон 1 л.



**СТЕРИЛИЗАЦИЯ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ВЫСОКОГО УРОВНЯ ИЗДЕЛИЙ
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
И ЭНДОСКОПОВ**

АДОНИУМ-АКТИВ

Универсальное порошкообразное
кислородосодержащее
дезинфицирующее средство

СОСТАВ:

- перкарбонат натрия;
- вспомогательные компоненты.

МИКРОБИОЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ:

- грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая микобактерии туберкулеза);
- вирусов (в отношении всех известных вирус-патогенов человека, в том числе вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов (в том числе гепатита А, В и С), герпеса, включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и других возбудителей острых респираторных инфекций, вирус полиомиелита, атипичной пневмонии, птичьего гриппа, свиного гриппа, ВИЧ).
- грибов рода кандиды, дерматофитов, плесневых грибов;
- обладает спороцидной и овоцидной активностью.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Текущая и заключительная дезинфекция, обеззараживание поверхностей в помещениях, проведение генеральных уборок.
- Дезинфекция куветов, реанимационных и пеленальных столов, наркозно-дыхательной аппаратуры, датчиков к аппаратам УЗИ.
- Дезинфекция жесткой мебели, оборудования, посуды, белья, транспорта и т. д.
- Дезинфекция медицинских отходов, включая выделения больного и кровь в густках.
- Для дезинфекции (различных хирургических и стоматологических ротационных, эндодонтических инструментов, а также стоматологических материалов), совмещенной с предстерилизационной очисткой (ПСО) ручным и механизированным способами (в том числе в ультразвуковых установках любого типа).
- Предварительная очистка эндоскопов, окончательная очистка эндоскопов, ДВУ.
- Стерилизация изделий медицинского назначения.
- Проведение генеральных уборок и борьба с плесенью.

Режимы применения:

	Концентрация, %	Экспозиция, мин
ДВУ	1,5	30
	2,5	15
Стерилизация	2,5	60
	6,0	15



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокоэффективное средство с микробицидной активностью в отношении компонентов крови и биологических субстратов.
- Высокое качество дезинфекции и стерилизации ИМН.
- Средство имеет хорошие моющие свойства, не портит обрабатываемые объекты, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов.
- Рекомендовано для использования на объектах коммунально-бытового обслуживания, в ЛПУ, прачечных в сфере отдыха, социального обеспечения и детских учреждениях.
- Не обладает кожно-резорбтивной и сенсibilизирующей активностью.

ФОРМА ВЫПУСКА: банка 1 кг.

БИСКОП-ФОРТЕ

Универсальное концентрированное
дезинфицирующее средство
с мощным эффектом

СОСТАВ:

- глутаровый альдегид;
- глиоксаль;
- ЧАС.

МИКРОБИОЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ:

- грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая микобактерии туберкулеза);
- вирусов (в отношении всех известных вирус-патогенов человека, в том числе вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов (в том числе гепатита А, В и С), герпеса, включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и других возбудителей острых респираторных инфекций, вирус полиомиелита, атипичной пневмонии, птичьего гриппа, свиного гриппа, ВИЧ и др.);
- грибов рода кандиды, дерматофитов, плесневых грибов;
- обладает спороцидной активностью.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Дезинфекция, мытье и дезодорирование всех видов поверхностей предметов интерьера, аппаратуры и оборудования, стоматологических оттисков, зубопротезных заготовок и протезов.
- Дезинфекция медицинских отходов (класса А, Б и В), включая выделения больного и кровь в сгустках.
- Для дезинфекции (различных хирургических и стоматологических ротационных, эндодонтических инструментов, а также стоматологических материалов), совмещенной с предстерилизационной очисткой (ПСО) ручным и механизированным способами (в том числе в ультразвуковых установках любого типа).
- Предварительная очистка эндоскопов, окончательная очистка эндоскопов, ДВУ.
- Стерилизация изделий медицинского назначения.
- Проведение генеральных уборок и борьба с плесенью.

Режимы применения:

	Концентрация, %	Экспозиция, мин
ДВУ	2,0	30
	3,0	5
Стерилизация	2,0	60
	5,0	15



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Средство имеет хорошие моющие и дезодорирующие свойства, не портит обрабатываемые объекты, не обесцвечивает ткани, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов.
- Рекомендовано для использования на объектах сферы обслуживания населения.
- Экологически безопасное и биоразлагаемое.
- Не обладает кожно-резорбтивной активностью.

Срок годности рабочих растворов – 28 суток.
ФОРМА ВЫПУСКА: канистра-дозатор 1 л.

РОСДЕЗ-ОКСИ

Универсальное концентрированное
кислородосодержащее
дезинфицирующее средство

СОСТАВ:

- ЧАС;
- перекись водорода и функциональные добавки.

МИКРОБИОЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ

- В отношении бактерий (в том числе микобактерий туберкулеза, возбудителей анаэробных и внутрибольничных инфекций, метициллин-резистентного золотистого стафилококка (MRSA), ванкомицин-резистентного энтерококка (VRE), синегнойной палочки).
- Обладает спороцидной, вирулицидной (в отношении всех известных вирусов-патогенов человека, в том числе вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов (в том числе гепатита А, В и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, энтеровирусов, ротавирусов, вирусов атипичной пневмонии (SARS), птичьего гриппа (H5N1), свиного гриппа (A/H1N1), гриппа человека, герпеса и др.
- Обладает спороцидной и фунгицидной активностью (кандида, трихофитон, плесень).

НАЗНАЧЕНИЕ

- Дезинфекция и мытье различных поверхностей или предметов (в том числе детской мебели, поверхностей аппаратов, приборов, санитарно-технического оборудования, предметов ухода за больными, обуви, ковров, транспорта).
- Дезинфекция, совмещенная с предстерилизационной очисткой изделий медицинского назначения (ручным и механическими способами). Предварительная, окончательная очистка и ДВУ эндоскопов.
- Стерилизация изделий медицинского назначения.
- Дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования воздуха (в том числе борьба с плесенью).
- Дезинфекция, чистка, мойка и дезодорирование медицинских отходов (классов Б и В), мусороуборочного оборудования и биотуалетов и проведение генеральных уборок.

Режимы применения:

	Концентрация, %	Экспозиция, мин
ДВУ	3,0	60
	7,0	15
Стерилизация	4,0	60
	8,0	15



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Средство неограниченно смешивается с водой.
- Не требует ротации.
- Обладает синергетическим тройным действием: дезинфицирующим, моющим и дезодорирующим; полностью нейтрализует неприятные запахи.
- Не оказывает сенсibiliзирующего и кожно-резорбтивного действия.
- Эффективно разрушает биопленки и препятствует их образованию, имеет хорошие моющие свойства, не фиксирует органические загрязнения на обрабатываемых поверхностях и инструментах.
- Обладает пролонгированным остаточным эффектом не менее 5 часов.

Срок годности рабочих растворов – 33 дня.

ФОРМА ВЫПУСКА: флакон 1 л.

БИСКОП-БИО

Универсальное двухкомпонентное
кислородосодержащее
дезинфицирующее средство

СОСТАВ:

- базовый раствор: водный раствор перекиси водорода, ингибитор коррозии;
- активатор: ацетилкапролактан, пропиленгликоль, ПАВ.

МИКРОБИОЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ:

- грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая микобактерии туберкулеза и возбудителей внутрибольничных инфекций);
- вирусов (в отношении всех известных вирус-патогенов человека, включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и других возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных и парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, птичьего гриппа, ВИЧ и др.);
- грибов рода кандиды и трихофитон, плесневых грибов;
- обладает овоцидными свойствами в отношении возбудителей паразитарных болезней (цист и ооцист простейших, яиц и личинок гельминтов);
- обладает спороцидными свойствами.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Дезинфекция, мытье и дезодорирование помещений, поверхностей, предметов интерьера, аппаратуры и оборудования, белья, посуды, транспорта и т. д.
- Дезинфекция биологического материала (жидкие отходы, кровь, сыворотка, смывные воды, выделения больного).
- Дезинфекция медицинских и пищевых отходов.
- Для дезинфекции (различных хирургических и стоматологических ротационных, эндодонтических коррозионно-стойких инструментов, а также стоматологических материалов) ручным способом.
- Дезинфекция высокого уровня (ДВУ) эндоскопов.
- Стерилизация изделий медицинского назначения (ИМН).
- Обработка поверхностей, пораженных плесневыми грибами.

Режимы применения:

	Время обеззараживания, мин
ДВУ	5
Стерилизация	15



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокоэффективное и экономичное дезинфицирующее средство.
- Обладает моющим и дезодорирующим действием, не фиксирует органические загрязнения.
- Тестировано на тест-штамме *Aspergillus niger*.

Срок годности рабочих растворов – 34 дня.

ФОРМА ВЫПУСКА: канистра 5 л, активатор 100 мл.



УЗКОНАПРАВЛЕННЫЕ
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ
СРЕДСТВА

КВАЛИЦИД

Готовое к применению универсальное дезинфицирующее средство

СОСТАВ:

- N,N-бис (3-аминопропил) додециламин в щелочной среде;
- ПАВ, функциональные компоненты.

МИКРОБИОЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ:

- грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая микобактерии туберкулеза);
- вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и других возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных и парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, птичьего гриппа, ВИЧ и др.);
- грибов рода кандиды и трихофитон.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Для дезинфекции (различных хирургических и стоматологических ротационных, эндодонтических инструментов, а также стоматологических материалов), совмещенной с предстерилизационной очисткой (ПСО) ручным и механизированным способами (в том числе в ультразвуковых установках любого типа).
- Дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокоэффективное, безопасное и экономичное дезинфицирующее средство.
- Препятствует развитию резистентной микрофлоры – препарат не требует ротации.
- Средство рекомендовано для клининга в ЛПО и ЛПУ.
- Обладает хорошими моющими свойствами в том числе относительно старых белковых загрязнений.
- Не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов, в том числе изделий из низколегированных и углеродистых сталей.

ФОРМА ВЫПУСКА: канистра-дозатор 1 л.



Основные режимы дезинфекции поверхностей:

Вид инфекции	Экспозиция, мин
Бактериальные, вирусные, туберкулез	15
Грибковые	20

Основные режимы дезинфекции и ПСО, совмещенные в одном процессе:

	Экспозиция, мин
Ручным способом	10
Механизированным способом	9

АДОНИУМ-АКТИВ

Универсальное концентрированное
кислородосодержащее
дезинфицирующее средство

СОСТАВ:

- перкарбонат натрия;
- вспомогательные компоненты.

МИКРОБИОЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ:

- грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая микобактерии туберкулеза);
- вирусов (в отношении всех известных вирус-патогенов человека, в том числе вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов (в том числе гепатита А, В и С), герпеса, включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и других возбудителей острых респираторных инфекций, вирус полиомиелита, атипичной пневмонии, птичьего гриппа, свиного гриппа, ВИЧ и др.);
- грибов рода кандиды, дерматофитов, плесневых грибов. Обладает спороцидной и овоцидной активностью.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Текущая и заключительная дезинфекция, обеззараживание поверхностей в помещениях, проведение генеральных уборок.
- Дезинфекция куветов, реанимационных и пеленальных столов, наркозно-дыхательной аппаратуры, датчиков к аппаратам УЗИ.
- Дезинфекция жесткой мебели, оборудования, посуды, белья, транспорта и т. д.
- Дезинфекция медицинских отходов, включая выделения больного и кровь в густках.
- Для дезинфекции (различных хирургических и стоматологических ротационных, эндодонтических инструментов, а также стоматологических материалов), совмещенной с предстерилизационной очисткой (ПСО) ручным и механизированным способами (в том числе в ультразвуковых установках любого типа).
- Предварительная очистка эндоскопов, окончательная очистка эндоскопов, ДВУ.
- Стерилизация изделий медицинского назначения.
- Проведение генеральных уборок и борьба с плесенью.
- Стирка белья, совмещенная с отбеливанием, дезинфекцией и удалением пятен, в том числе загрязненного кровью и другими биологическими субстратами.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокоэффективное средство с микробицидной активностью в отношении компонентов крови и биологических субстратов.
- Высокое качество дезинфекции и стерилизации ИМН.



Режимы применения:

	Концентрация, %	Экспозиция, мин
Дезинфекция медицинских и пищевых отходов	0,5	120
	1,5	60
Генеральные уборки	0,15	60
	0,25	30
Деинвазия объектов, загрязненных возбудителями и паразитарных болезней	2,5	90
	5,0	60

- Средство имеет хорошие моющие свойства, не портит обрабатываемые объекты, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов.
- Рекомендовано для использования на объектах коммунально-бытового обслуживания, в ЛПУ, прачечных в сфере отдыха, социального обеспечения и детских учреждениях.
- Не обладает кожно-резорбтивной и сенсibilизирующей активностью.

ФОРМА ВЫПУСКА: банка 1 кг.



ХЛОРСОДЕРЖАЩИЕ ПРЕПАРАТЫ

АКВА-ХЛОР

Хлорсодержащее дезинфицирующее средство (таблетки и гранулы)

СОСТАВ:

- натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты;
- функциональные компоненты.

МИКРОБИОЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ:

- грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей туберкулеза);
- вирусов (тестировано на вирусах полиомиелита, гепатита В и ВИЧ, аденовирусов);
- грибов рода кандиды и трихофитон.

НАЗНАЧЕНИЕ:

- **Гранулы:** дезинфекция жидких выделений, крови, ликвора, сыворотки, плазмы и других биологических жидкостей и патологических выделений (засыпание гранулами, заливание рабочим раствором).
- **Таблетки:** дезинфекция поверхностей, предметов обстановки, мебели, санитарно-технического оборудования, белья, игрушек, обуви и пр. Обеззараживание медицинских отходов. Дезинфекция санитарного и медицинского транспорта, изделий медицинского назначения и т. д.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Классическое дезинфицирующее средство, воплощенное в новых технологиях для удобного применения.
- Высокая эффективность и экономичность, хорошая растворимость.
- Умеренное содержание активного хлора (таблетки – 42,5 %, гранулы – 60 %).
- Не портит обрабатываемые поверхности из дерева, стекла, пластмассы, резины и коррозионно-стойкого металла.

Срок годности рабочих растворов – 5 суток.

ФОРМА ВЫПУСКА: банка 1 кг.



«Вне графика генеральную уборку проводят в случае получения неудовлетворительных результатов микробной обсемененности внешней среды и по эпидемиологическим показателям».
(СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 11.8)

«Органические отходы, образующиеся в операционных, лабораториях, микробиологические культуры и штаммы, вакцины, вирусологически опасный материал после дезинфекции собираются в одноразовую твердую герметичную упаковку».
(СанПиН 2.1.7.728-99, п. 5.3.5)



**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
И МАТЕРИАЛЫ**

ИНДИКАТОРНЫЕ ТЕСТ-ПОЛОСКИ

- Полоски индикаторные для экспресс-контроля концентраций рабочих растворов дезинфицирующих средств: АДОНИУМ-АКТИВ, АКВА-ХЛОР, БИСКОП-БИО, БИСКОП-ФОРТЕ, ВИРБАКСАН, ДЕЗРЕКС, ДЕНИДЕЗ, ИНЖЕНИУМ, РОСДЕЗ, РОСДЕЗ-ОКСИ, РОСДЕЗ-ЭНЗИМ.
- Предназначены для использования персоналом лечебно-профилактических учреждений, работниками дезинфекционной и санитарно-эпидемиологических служб, а также других учреждений, применяющих соответствующие дезинфицирующие средства.



ДОЗАТОРЫ

НАСОС-ДОЗАТОР ЛОКТЕВОЙ

- Для флаконов емкостью не более 1 литра.
- Устанавливается во все еврофлаконы.
- Корпус дозатора выполнен из ударопрочного ABS-пластика.
- Локтевой рычаг изготовлен из нержавеющей стали.
- Предназначен для подачи жидкого мыла или антисептика порциями от 1,5 до 2,5 мл.

«При использовании дозатора новую порцию антисептика (или мыла) наливают в дозатор после его дезинфекции, промывания водой и высушивания. Предпочтение следует отдавать локтевым дозаторам и дозаторам на фотоэлементах». (СанПиН 2.1.3.1375-03, 12.4.5)




ОБРАБОТКА РУК




УЗКОНАПРАВЛЕННЫЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА



ОБРАБОТКА ЭНДОСКОПОВ И ИНСТРУМЕНТОВ К НИМ

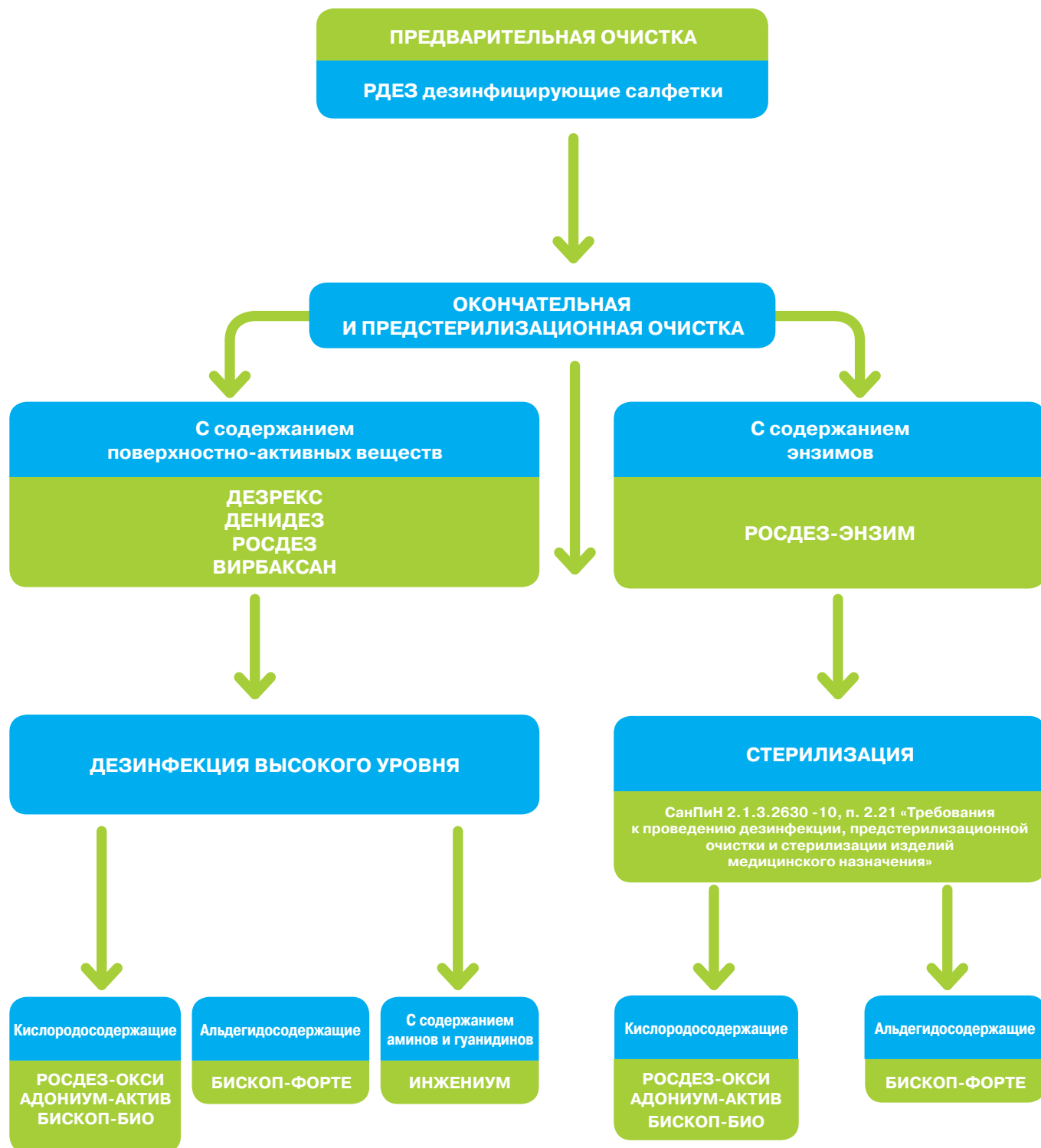

ОБРАБОТКА ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

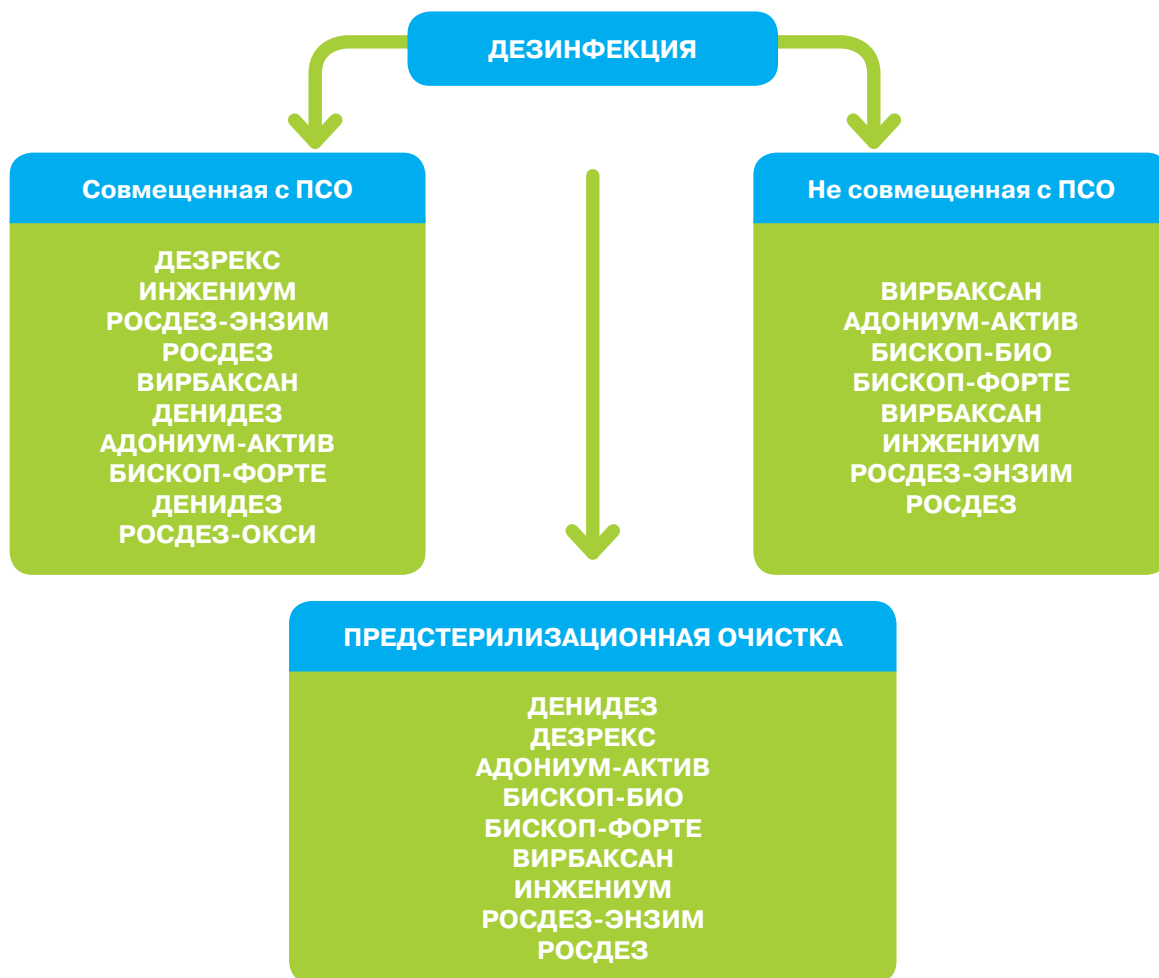

ПРИМЕНЕНИЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ В СТОМАТОЛОГИИ



Область применения Дезинфицирующее средство	Обработка поверхностей	Мытье поверхностей	Дезинфекция биологического материала	Дезинфекция кузовов и нарочно-дыхательного оборудования	Дезинфекция ИМН	ПСО ИМН	ДВУ эндоскопов	Стерилизация ИМН	Дезинфекция стоматологических изделий	Дезинфекция вращающихся ИМН	Дезинфекция эндоскопов и инструментов к ним	Обеззараживание объектов, загрязненных цистами/ооцистами простейших	Дезинфекция датчиков к аппаратам УЗИ	Борьба с плесенью	Дезодорирование	Санитарная обработка кожных покровов	Гигиеническая обработка рук	Хирургическая обработка рук	Обработка инъекционного поля	Обработка операционного поля
АДОНИУМ-АКТИВ	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						
АКВА-ХЛОР	+	+	+																	
АМАДЕУС	+												+				+	+	+	+
АМАДЕУС-ОП																		+	+	
АРМАСЕПТИК																+	+	+	+	+
БИСКОП-БИО	+	+	+		+		+	+	+	+	+			+	+					
БИСКОП-ФОРТЕ	+	+			+	+		+	+	+	+			+	+					
ВИРБАКСАН	+	+	+	+	+	+			+	+	+	+		+	+					
ВИРБАКСАН-СПРЕЙ	+								+				+		+					
ДЕЗРЕКС	+	+	+	+	+	+			+		+			+						
ДЕНИДЕЗ	+	+		+		+			+		+			+						
ИНЖЕНИУМ	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+				+					
КВАЛИЦИД	+	+				+			+	+	+									
РДЕЗ дезинф. салфетки	+								+				+				+			
РДЕЗ инъекционные салфетки	+																+	+	+	+
РОСДЕЗ-ОКСИ	+	+	+	+			+	+	+	+	+			+						
РОСДЕЗ-ЭНЗИМ	+	+	+	+	+	+	+		+		+	+			+					
РОСДЕЗ	+	+	+	+	+	+			+	+	+	+		+	+					
РОФАЛЬ жидкое мыло																+				
РОФАЛЬ антибактериальное мыло																+				

Сводная таблица по действующим веществам дезинфицирующих и моющих средств ООО «РДЕЗ»

Действующее вещество / Дезинфицирующее средство	Алкилдицилдиметиламмоний. Хлорид (ЧАС) (%)	Дидицилдиметиламмоний. Хлорид (ЧАС) (%)	Полигексаметиленгуанидин. Гидрохлорид (ПГМГ) (%)	Полигексаметиленбигуанидин. Гидрохлорид (ПГМБ) (%)	Изопропанол (2-пропанол) (%)	Этанол (%)	Перекись водорода (%)	Перкарбонат натрия (%)	Натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты (%)	Глиоксаль (%)	Щелочные компоненты	ПАВ	Гель алое	Ферменты	Рн 1% водного раствора (ед.)	Срок годности (лет)	Срок годности рабочих растворов (суток)
АДОНИУМ-АКТИВ								55							8,0-10,0	2	10
АКВА-ХЛОР (таблетки)									84							3	5
АКВА-ХЛОР (гранулы)									99							3	5
АМАДЕУС	0,15				37,5											5	
АМАДУС-ОП	0,15				37,5											5	
АРМАСЕПТИК				0,45									+		5,5-7,5	3	
БИСКОП-БИО							2,4								7,0-10,0	2	34
БИСКОП-ФОРТЕ	27									6					2,5-5,5	3	28
ВИРБАКСАН	2,8		2												9,0-11,0	5	
ВИРБАКСАН-СПРЕЙ				0,22	30												
ДЕЗРЕКС												+			10,0-12,0	3	20
ДЕНИДЕЗ												+			7,5-10,5	5	30
ИНЖЕНИУМ			1,3												8,0-10,0	5	33
КВАЛИЦИД											+	+			11,5-13,5	2	
РДЕЗ дезинф. салфетки				0,45		70							+			3	
РДЕЗ инъекц. салфетки																	
РОСДЕЗ-ОКСИ		4,5					17,5								5,0-6,0	3	36
РОСДЕЗ-ЭНЗИМ	18,5	1,5													5		34
РОСДЕЗ	3,5													+	9,0-10,0	5	
РОФАЛЬ жидкое мыло												+		7,0-2,0			34
РОФАЛЬ антибактер. мыло												+					

ДЛЯ ЗАМЕТОК



RDDEZ



ООО «РДЕЗ»
660100, г. Красноярск,
ул. Академика Киренского, 67, пом. 263
т. 8 (391) 202-14-82
www.rdez.ru

RDEZ